

***For delivering safe regenerative  
medical products to patients . . .***



再生医療研究、CPC (Cell Processing Center) 向け


**スミロン スーパークオリティ**



# スミロンスーパークオリティは「高度品質管理製品」です

- ✔ **SAL10<sup>-6</sup> 無菌性保証** ISO11137-2/JIS T0806-2に従って確立した滅菌線量を照射
- ✔ **材料安全性** 日本薬局方に基づく灰化試験、溶出物試験、細胞毒性試験を実施し選定
- ✔ **パイロジェンレベル** ロット毎にエンドキシンレベル(0.25EU/mL未満)を確認
- ✔ **異物管理** 全数検査の実施
- ✔ **包装** 3重包装仕様  
少量入り小分け包装仕様
- ✔ **有効期限** 製造後3年

スミロンスーパークオリティ シャーレ包装例

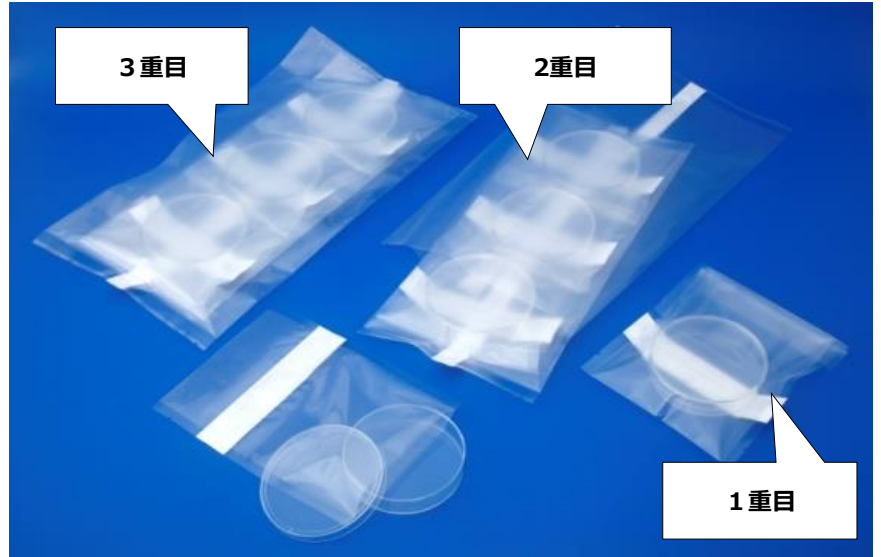

## 【検査成績書】

弊社、HP内の下記アドレスもしくは右記QRコードより試験成績書がダウンロード出来ます。

<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/download/index.html>



## 検査成績書ダウンロード



検査成績書ダウンロード

### 検査成績書

品名	スミロンスーパークオリティ ピペット25mL
品番	MS-66250S
製造番号	
製造年月	
有効期限	
仕様	容量：25mL 最小目盛り：0.2mL
材質	先端チップ：ポリスチレン 本体：ポリスチレン 綿栓チップ：ポリスチレン 綿栓：綿
包装形態	1本/包装、10包装を2重包装（計3重包装）×10
入数	100本/箱



秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4  
秋田住友パーク株式会社  
メディカル・バイオ部門 品質保証部



## ヘルスケア営業本部（バイオ製品） 検査成績書ダウンロード

品番とロットNoで検索をすると、検査成績書（PDF）をダウンロードすることができます。

品番にはハイフンは入れないでください。

検索後、該当ファイルが表示されない場合は、ヘルスケア営業本部バイオ製品営業部までお問い合わせください。

品番 MS66250S

ロットNo xxxxxxxx

検索


頻度	判定
工程検査全数	
工程検査全数	
工程検査全数	
工程検査全数	
工程検査全数	

## スミロンスーパーオリティピペット（3重包装内の1重包装目）

Lot番号と有効期限が刻印されております。



アイソレーターなどのグローブごしでも剥きやすいように段差を付けております。

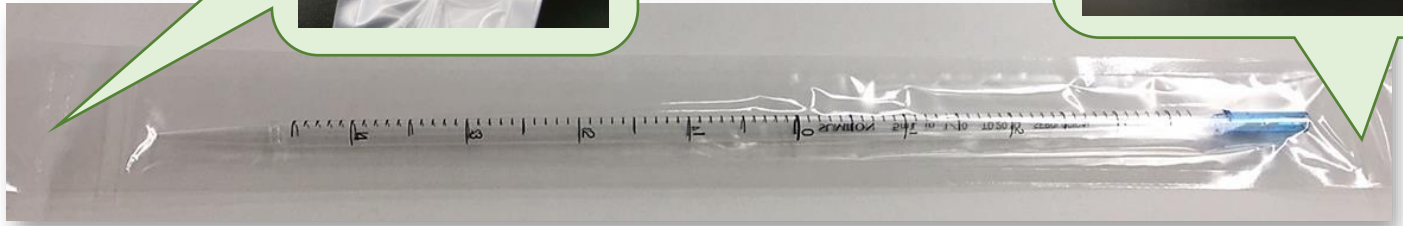

No	Question	Answer
1	3重包装の異物検査はどのように実施していますか？	全品、目視による異物検査を実施しております。
2	滅菌方法はどのように実施していますか？	三重包装後、放射線滅菌を実施しております。
3	溶出物／抽出物に関するデータは入手可能でしょうか？	入手可能です。 HPで公開しております検査成績書に記載しております。
4	滅菌保証レベルに関する記載はありますか？	各ロット毎に検査成績書に記載しております。滅菌はISO11137-2/JIST0806-2に準じた方法によって確立した $SAL10^{-6}$ の滅菌線量にて実施しております。
5	動物由来（特にBSE/TSE）に関する証明書は発行出来ますか？	証明書の発行は可能です。
6	材料の安全性について試験されていますか？	日局プラスチック製医薬品容器試験法の溶出物試験、灰化試験、細胞毒性試験を実施しています。
7	滅菌済みを確認するための確証はどのように分かりますか？	滅菌済みの確証であるインジケータを製品箱へ貼付しています。
8	二重包装内の無菌性は担保されていますか？	一重包装内のみ $SAL10^{-6}$ を保証しております。

【製造工場（秋田県）】



全数、異物検査時の画像（秋田住友バーク内）

製品一覧は裏面へ

# 製品一覧

【有効期限】 製造後3年

【保存温度】 室温

品番	品名	仕様		ケース 入数	単価	参考価格 (税抜)
		3重包装形態	入数			
MS-66020S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 mL	1本包装X10	10セット	100	219	21,900
MS-66050S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 mL	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-66052S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-66100S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 1 0 mL	1本包装X10	10セット	100	276	27,600
MS-66102S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 1 0 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	276	27,600
MS-66250S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 5 mL	1本包装X10	10セット	100	311	31,100
MS-66252S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 5 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	311	31,100
MS-66500S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 0 mL	1本包装X10	10セット	100	529	52,900
MS-65022S	スミンス-パ-クオリティ アスピレーションピペット	1本包装X10	25セット	250	242	60,500
MS-65020S	スミンス-パ-クオリティ アスピレーションピペットロング	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-4601WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウトター 1 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4603WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウトター 2 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4604WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウトター 4 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	162	24,300
MS-4605WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウトター 5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	162	24,300
MS-4701WS	スミンス-パ-クオリティ スリムチューブ0.5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4702WS	スミンス-パ-クオリティ スリムチューブ1.5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-56150S	スミンス-パ-クオリティ 遠沈管 1 5 mL	5本包装X3	16セット	240	173	41,520
MS-56500S	スミンス-パ-クオリティ 遠沈管 5 0 mL	5本包装X3	10セット	150	220	33,000
MS-58500S	スミンス-パ-クオリティ スナップコニカル 5 0 mL	5本包装	12セット	60	345	20,700
MS-56225S	スミンス-パ-クオリティ ボトル 2 2 5 mL	4本包装	12セット	48	860	41,280
MS-80060S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 6 F	1個包装X2	20セット	40	874	34,960
MS-80120S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装X2	20セット	40	897	35,880
MS-80240S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装X2	20セット	40	920	36,800
MS-80480S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装X2	20セット	40	943	37,720
MS-8096FS	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装 2	28セット	56	980	54,880
MS-8006RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 6 F	1個包装X2	20セット	40	874	34,960
MS-8012RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装X2	20セット	40	897	35,880
MS-8024RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装X2	20セット	40	920	36,800
MS-8048RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装X2	20セット	40	943	37,720
MS-8096RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装X2	28セット	56	980	54,880
MS-10350S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 3 5 mm ツバ付	5個包装X2	10セット	100	230	23,000
MS-10600S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	322	19,320
MS-13900S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装X3	20セット	60	552	33,120
MS-10150S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装X2	12セット	24	1,010	24,240
MS-1135RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 3 5 mm	5個包装X2	10セット	100	230	23,000
MS-1160RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	322	19,320
MS-1390RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装X3	20セット	60	552	33,120
MS-1015RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装X2	12セット	24	1,010	24,240
MS-23050S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	437	78,660
MS-23250S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 7 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装X3	10セット	30	966	28,980
MS-23600S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1,940	31,040
MS-23800S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	2,130	25,560
MS-2305RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	437	78,660
MS-2325RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 7 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装X3	10セット	30	966	28,980
MS-2360RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1,940	31,040
MS-2380RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm <sup>2</sup> フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	2,130	25,560
MS-93100S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー Sブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装X10	5セット	50	460	23,000
MS-93101S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー S先端固定タイプブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装X10	5セット	50	460	23,000
MS-93170S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー Mブレード (幅17mm×長さ250mm)	1本包装X10	5セット	50	580	29,000
MS-93300S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー Lブレード (幅30mm×長さ350mm)	1本包装X10	5セット	50	690	34,500

## 住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部 マーケティング営業部  
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル  
 【東日本エリア】 TEL : 03-5462-4831 FAX : 03-5462-4835  
 【西日本エリア】 TEL : 06-7669-0031 FAX : 06-7223-8691  
 ■ E-mail : s-bio\_inquiry@ml.sumibe.co.jp  
 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp

